

# Medikro Pro

PRODUKTKOD  
M915

Allt-i-ett PC-baserat laboratorie-spirometer

**Inbyggd mätning av omgivningsförhållanden**

**Säkra engångstillbehör**

**Nätverk och anslutningsmöjligheter**

**Freddy The Frog interaktivt verktyg**





## KÖP DETALJER

### Grundpaket - M985

Detta system innehåller ett startpaket med förbrukningsartiklar

- M915 Medikro Pro Spirometer
- M9256-100 Disponibel flödesgivare, 100 stycken
- M9264-200 Reservtryckslang med anslutningar för flödesgivare, längd 200 cm
- Näsklämma, 100 stycken

### Komplett paket - M975

Alla komponenter som användaren behöver

- M915 Medikro Pro Spirometer
- M9474 Kalibreringsspruta
- M9256-100 Disponibel flödesgivare, 100 stycken
- M9264-200 Reservtryckrör med anslutningar för flödesgivare, längd 200 cm
- Näsklämma, 100 stycken

## TJÄNSTEAVTAL

Välj en serviceavtal med Medikro för att förbättra din utrustnings livslängd och tillförlitlighet.


### Obegränsad garanti

Kunder med serviceavtal får en garantiutökning så länge de fortsätter med årligt underhåll, vilket säkerställer långsiktigt värde

Medikro Pro representerar industristandarden för PC-baserad spirometri. Ett mycket exakt och precist diagnostiskt verktyg utrustat med inbyggda sensorer som mäter omgivningsförhållanden. Dessa sensorer möjliggör automatisk realtidskorrigering av BTPS, vilket ytterligare förbättrar noggrannheten i resultaten.

För att genomföra spirometri tester, använder Pro Medikro SpiroSafe flödesomvandlare, som är enkel att använda och säkerställer skydd av patienter från korskontaminering. För ökad säkerhet används bakterie- och virusfilter för att skydda operatörer. Båda produkterna är designade för engångsbruk, vilket gör det enkelt att ta emot fler patienter.

## HÖJDPUNKTER

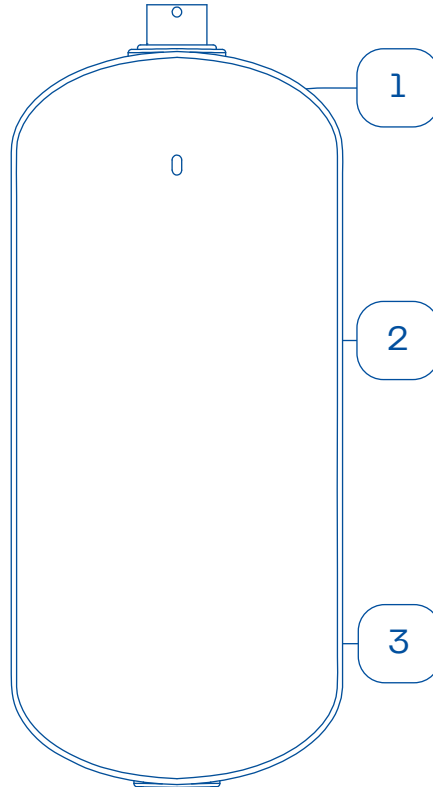

### VCT-teknik

Vibration Control Tubing (VCT) eliminerar signalbrus orsakat av patientens och slangens rörelser. Detta stabiliserar signalen och förbättrar därmed kvaliteten på spirometrin.

### Automatiserad BTPS-korrigerig i realtid

Medikro Pro har temperatur-, tryck- och fuktighetssensorer som automatiskt spårar miljöförhållanden. Dessa sensorer möjliggör BTPS-korrigerig i realtid, vilket säkerställer att resultaten är korrekta och exakta.

### Valfri bronkial provokation

Medikro Pro ger flexibilitet vid bronkial provokationstestning genom att användarna kan välja mellan färdiga protokoll, skapa nya protokoll baserade på befintliga mallar eller generera helt nya protokoll.

## KUNDERS ÅTERKOPPLING

Medikro-systemen är pålitliga och prisvärda, deras mätningar är precisa och programvaran är väl genomtänkt!

ENRIQUE CIMAS. GP FAMILJEMEDICIN



Medikro Oy  
Pioneerinkatu 3  
70800 Kuopio, Finland

+358 44 777 7002  
www.medikro.com